

GYNECARE TVT EXACT™ oferuje kontrolę i wygodę w rękach chirurga³

Zaprojektowany z myślą o usprawnieniu procedur zarówno dla chirurga, jak i dla szpitala

- Dostępny w postaci gotowego do użycia sterylne zestawu przeznaczanego dla jednej pacjentki
- Eliminuje dodatkowe manipulacje w sali operacyjnej
- Umożliwia wykonanie jednej cystoskopii



Kod produktu do zamawiania GYNECARE TVT EXACT™: TVTRL

Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem (22) 237 83 05. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.

WSKAZANIA: System GYNECARE TVT EXACT™ jest przeznaczony do użycia jako podwieszenie łonowe dla cewki moczowej w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wynikającego z nadmiernej ruchomości cewki moczowej i/lub niewydolności zwieracza wewnętrznego.


PRZECIWSKAZANIA: Tak jak w przypadku każdej operacji wszczepienia podwieszenia, zabiegu tego nie należy wykonywać u pacjentek w ciąży. Ponadto, ponieważ siatka PROLENE nie rozciąga się w istotnym stopniu, zabiegu nie należy wykonywać również u kobiet, u których struktury anatomiczne mogą w przyszłości powiększać się, w tym także u kobiet planujących kolejne ciążę.

PIŚMIENNICTWO: 1. Dane z badań własnych, Ethicon, Inc. 2. Nilsson CG, Palva K, Rezapour M, Falconer C. Eleven years prospective follow-up of the tension-free vaginal tape procedure for treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J.2008;19(8):1043-1047. 3. Instrukcja użycia system kontynencji GYNECARE TVT EXACT™. Somerville, NJ: Ethicon, Inc; 2009. 4. Ogah J, Cody JD, Rogerson L. Minimally invasive synthetic suburethral sling operations for stress urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD006375. DOI: 10.1002/14651858.CD006375.pub2.

Szczegółowy opis produktu znajduje się w instrukcji użycia.

Wykorzystane w niniejszym dokumencie znaki handlowe osób trzecich stanowią własność odpowiednich podmiotów.

Zwiększ kontrolę nad swoją ręką

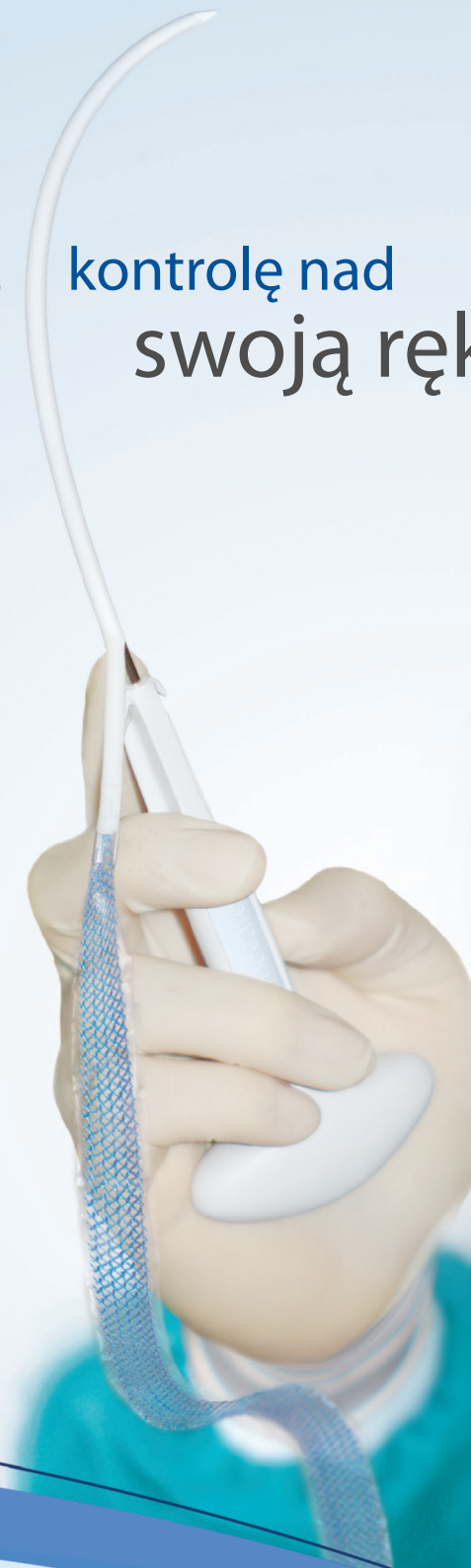

Ergonomia, która zwiększa kontrolę nad najbardziej precyzyjnym narzędziem chirurga: własną ręką.¹

GYNECARE TVT EXACT™ oferuje chirurgowi doskonałą kontrolę dzięki zintegrowanemu systemowi wprowadzania¹

GYNECARE TVT EXACT™, zaprojektowany do zabiegów załonowych, zwiększa kontrolę dzięki zwrotnemu przenoszeniu bodźców dotykowych

Sztywny trokar

Sztywny trokar o średnicy 3,0 mm pozwala utrzymać kontrolę podczas przechodzenia przed tkanki, przy jednoczesnym zredukowaniu siły penetracji.

Gładka, zamknięta końcówka trokara

Trokar posiada gładką powierzchnię od uchwytu po zamkniętą końcówkę w celu zredukowania pociągania tkanek podczas wprowadzania igły

Ulepszona ergonomiczna rękojeść


Rękojeść zapewnia zwrotne przenoszenie bodźców dotykowych podczas przechodzenia przez tkanki

GYNECARE TVT EXACT™ opiera się na 12 latach udanych zabiegów załonowych²


Taka sama niezawodna konstrukcja¹

- GYNECARE TVT™ i GYNECARE TVT EXACT™ mają identyczną krzywiznę trokara i promień końcówki¹
- Krzywizna trokara i promień końcówki są zaprojektowane w sposób zapewniający utrzymanie kontaktu trokara z tylną powierzchnią kości łonowej³
- Narzędzia GYNECARE TVT™ użyto podczas ponad miliona zabiegów na całym świecie¹
- Wykazano, że używanie GYNECARE TVT™ jest związane z istotnie mniejszym ryzykiem perforacji i zaburzeń mikcji⁴

GYNECARE TVT EXACT™

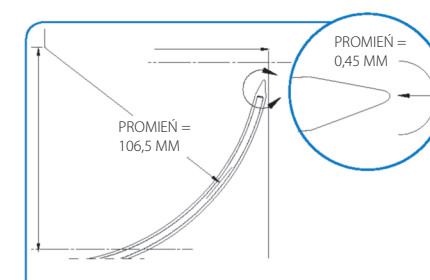

GYNECARE TVT™

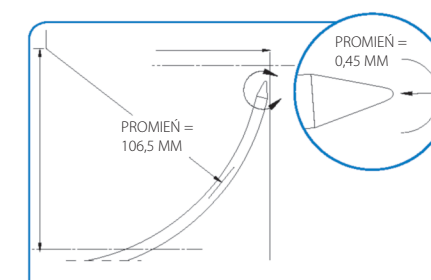


Przegląd Cochrane 2009

	PERFORACJE PĘCHERZA MOCZOWEGO*	PERFORACJE POCHWY*	ZABURZENIA MIKCCJI*
GYNECARE TVT™ RETROPUBIC ⁴	4,7%	0,7%	2,0%
SPARC™	8,5%	3,5%	6,0%
ADVANTAGE®	BRAK RANDOMIZOWANYCH, KONTROLOWANYCH BADAŃ		
ADVANTAGE FIT™			
ALIGN™			

*Istotne statystycznie

Taka sama, sprawdzona, laserowo wycięta taśma¹

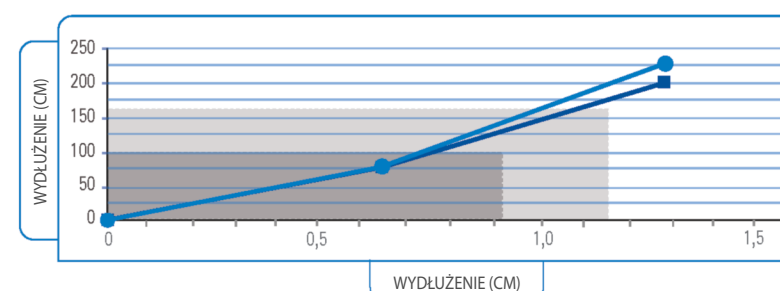

- Laserowo wycięta taśma GYNECARE TVT™
- Mechanicznie wycięta taśma GYNECARE TVT™
- Zakres fizjologiczny taśmy przed odkształceniem
- Maksymalne ciśnienie w cewce moczowej in vivo

- Laserowo wycięta taśma w produktach GYNECARE TVT™ i GYNECARE TVT EXACT™ wykazuje podobne właściwości rozciągania jak mechanicznie wycięta taśma TVT w przewidywanym zakresie fizjologicznym
- Laserowo wycięta taśma jest najczęściej używanym implantem przez chirurgów wykonujących zabiegi załonowe na świecie*

Taka sama gładka koszulka implantu¹

- Pozbawiona krawędzi plastikowa koszulka implantu jest łatwa do usunięcia w celu zminimalizowania wstępnego napięcia i odkształcenia taśmy.

*Laserowo wycięte taśmy są w użyciu od 2005 r.

Gynecare
TVT EXACT™